

1 Bestimmung des Untergrundes

Zur Bestimmung des Untergrundes wurden 7 Messungen durchgeführt. Für die Messungen wurde das Zählrohr eingeschaltet ohne eine Probe auf das Zählrohr zu stecken. Die Messungen liefen jeweils 300s.

Die entstanden Werte dieser Messungen sind in Tabelle 1 zu finden.

Aus diesen Werten wird nun ein arithmetischer Mittelwert berechnet. Dieser wird dann noch auf ein Zeitintervall von 30s skaliert, damit dieser Mittelwert in den Folgenden Aufgaben ohne weitere Anpassung verwendet werden kann.

Es ergibt sich eine Untergrundrate von $13.9 \approx 14[N_U/30s]$.

2 Bestimmung der Halbwertszeit von Vanadium

In diesem Teil wurde die aktivierte Vanadiumprobe umgehend auf das Geiger-Müller-Zählrohr gesteckt und es wurden die Impulse in einem Zeitintervall von 30s abgelesen. Diese Messdaten sind in Tabelle 2 zu finden. Von diesen Werten wird der im letzten Teil berechnete Mittelwert abgezogen. Anschließend werden die entstehenden Werte mit Fehler in einen halblogarithmischen Diagramm dargestellt.

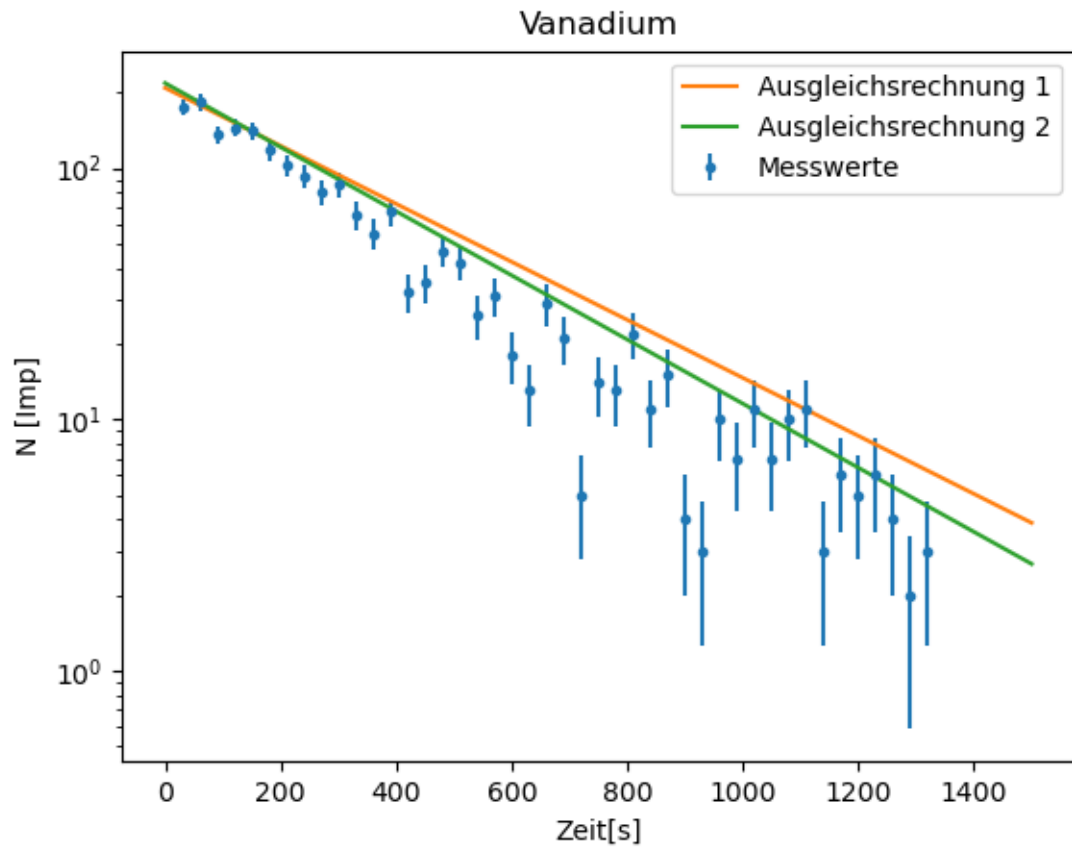


Figure 1: Bestimmung der Halbwertszeit von Vanadium

Als Ausgleichsfunktion wurde das Zerfallsgesetz verwendet. Dieses wurde für die Bestimmung der Halbwertszeit dann noch umgestellt.

$$N(t) = N_0 * e^{-\lambda t}$$

$$\frac{1}{2}N_0 = N_0 * e^{-\lambda T}$$

$$T = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Für die erste Ausgleichsrechnung wurden alle gemessenen Werte verwendet. Mit der Python-Funktion "*scipy.optimize.curvefit*" ergibt sich:

$$N_0 = 208.761825 \pm 6.069003$$

$$\lambda = 0.002657 \pm 0.000106$$

(1)

Daraus lässt sich die Halbwertszeit berechnen zu:

$$T_1 = 261 \pm 10s$$

Bei der zweiten Ausgleichrechnung werden nun nur die Werte bis zur doppelten Halbwertszeit für die Ausgleichsrechnung verwendet. Also alle Messwerte bis zu einer Zeit von maximal 520s. Für die Parameter ergeben sich diesmal die Werte:

$$\begin{aligned} N_0 &= 218.126931 \pm 7.601301 \\ \lambda &= 0.002937 \pm 0.000170 \end{aligned} \tag{2}$$

Die entstehende Halbwertszeit hat nun den Wert:

$$T_2 = 236 \pm 14s$$

3 Halbwertszeit von Rhodium

Analog zu der Vorgehensweise bei Vanadium wird auch bei der Halbwertszeit zunächst ein halblogarithmisches Diagramm erstellt. Diesmal wird die Ungergrundrate wieder angepasst, da das Zeitintervall nun nur 15s beträgt. Die gemessenen Werte für Rhodium sind in Tabelle 3 zu sehen.

Das entstehende Diagramm mit dem angepassten Untergrund und dem Fehler \sqrt{N} sieht folgendermaßen aus:

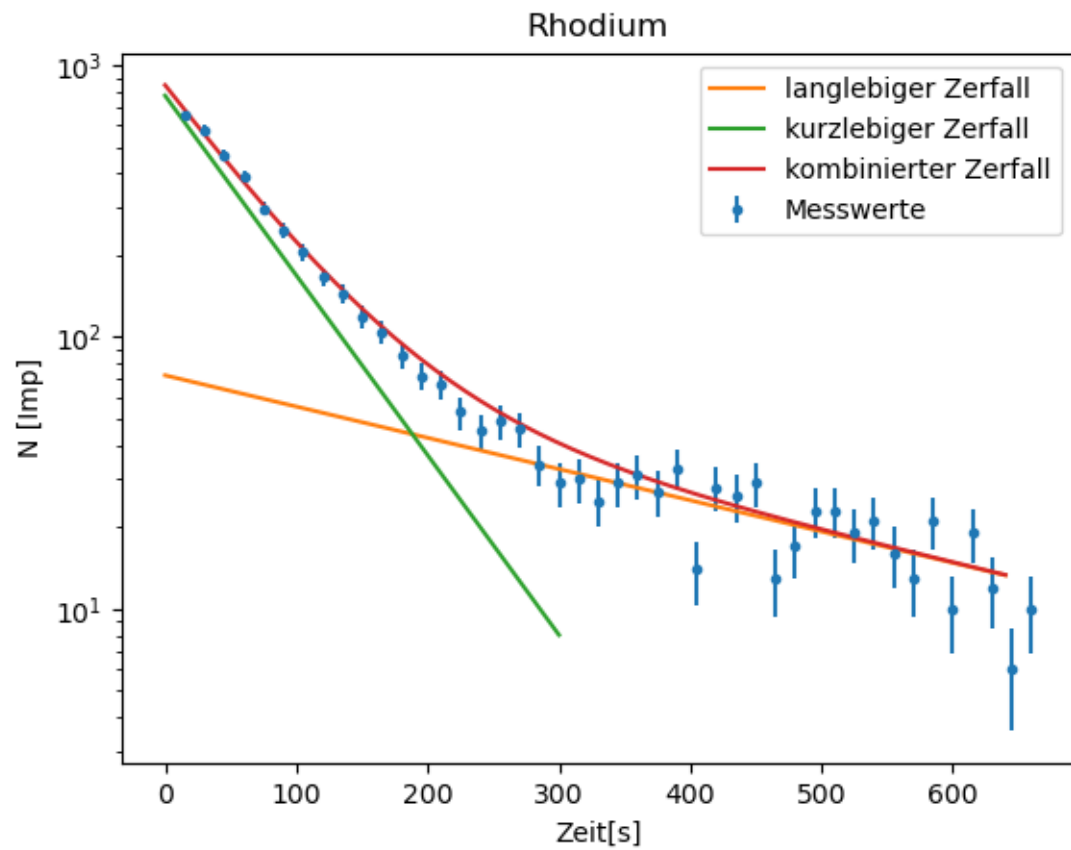


Figure 2: Bestimmung der Halbwertszeit von Rhodium

4 Tabellen

N_U [Imp/300s]
129
143
144
136
139
126
158

Table 1: Messung zur Bestimmung des Untergrundes

t [s]	N [Imp]
30	189
60	197
90	150
120	159
150	155
180	132
210	117
240	107
270	94
300	100
330	79
360	69
390	81
420	46
450	49
480	61
510	56
540	40
570	45
600	32
630	27
660	43
690	35
720	19
750	28
780	27
810	36
840	25
870	29
900	18
930	17
960	24
990	21
1020	25
1050	21
1080	24
1110	25
1140	17
1170	20
1200	19
1230	20
1260	18
1290	16
1320	17

Table 2: Messwerte zur Bestimmung der Halbwertszeit von Vanadium

t [s]	N [Imp]
15	667
30	585
45	474
60	399
75	304
90	253
105	213
120	173
135	152
150	126
165	111
180	92
195	79
210	74
225	60
240	52
255	56
270	53
285	41
300	36
315	37
330	32
345	36
360	38
375	34
390	40
405	21
420	35
435	33
450	36
465	20
480	24
495	30
510	30
525	26
540	28
555	23
570	20
585	28
600	17
615	26
630	19
645	13
660	17

Table 3: Messwerte zur Bestimmung der Halbwertszeit von Rhodium